



# グライナーBenchTopクーラー

## 酵素・試薬・蛋白の失活防止の必需品

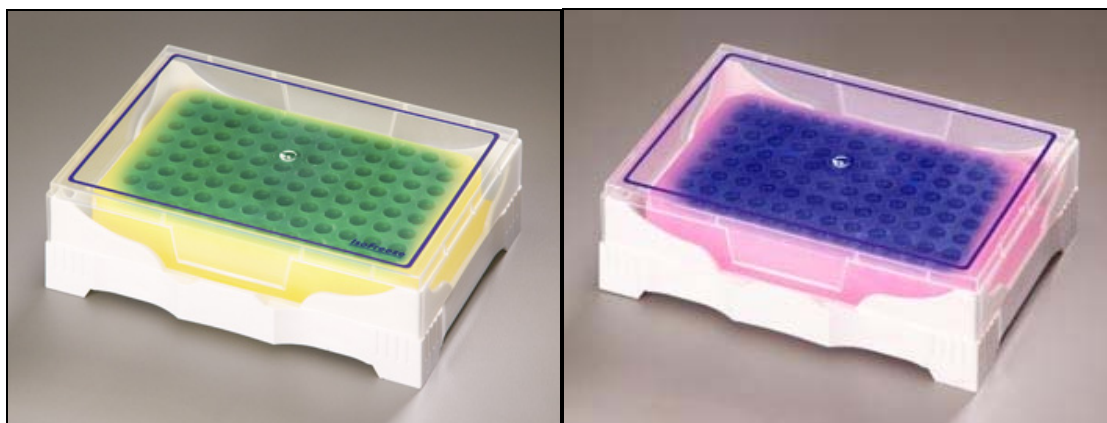

● >7℃でグリーン→イエローへ色変化 ● >7℃でバイオレット→ピンクへ色変化

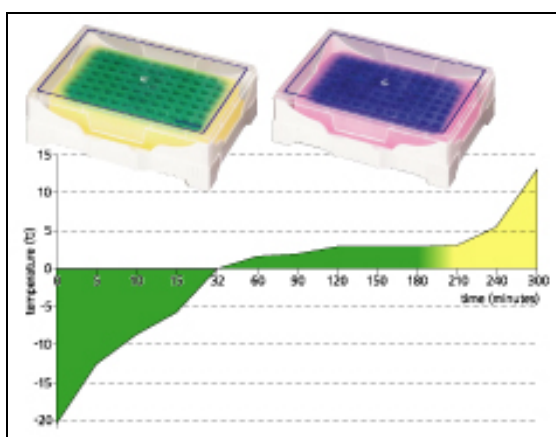

蓋付き。積み重ねて収納可能

- PCRチューブ 0.2mLを96本
  - PCR 8連チューブバンド 0.1mLを12本
  - PCR 8連チューブバンド 0.2mLを12本
  - PCR12連チューブバンド 0.2mLを 8本
  - PCRプレート 96wellを1枚
- ① -20℃で8時間冷却、使用前に室温で30分放置。  
② 0℃～4℃の低温が≒3時間維持されます。

| 製品番号   | BenchTopクーラー            | 2台セット価格            | 10台セット特価            |
|--------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 802208 | イエロー<br>(グリーン→イエローへ色変化) | ¥9000<br>(1台¥4500) | ¥31500<br>(1台¥3150) |
| 802209 | ピンク<br>(バイオレット→ピンクへ色変化) | ¥9000<br>(1台¥4500) | ¥31500<br>(1台¥3150) |

\* 10台セット特価は定価の30%オフ、消費税は含まれていません。

|                     |   |
|---------------------|---|
| (株)グライナー・ジャパン       | Greiner Bio-One Co., Ltd.   |
| 東京都港区赤坂2-17-44      | <a href="http://www.greiner-bio-one.co.jp">http://www.greiner-bio-one.co.jp</a> |
| 電話 03-3505-8875(代表) | FAX 8945(器材・機器) 8879(受託・試薬)   |